

# Manuel d'Utilisation



Logostick

Version 1.2

Mars 2024


# Introduction

---

- Le Logostick, bien plus qu'un simple appareil connecté, représente une solution intelligente visant à améliorer le suivi des exercices essentiels en orthophonie et kinésithérapie.
- En plus de ses fonctions de notification, il simplifie l'introduction de données et le partage d'informations avec les praticiens.
- Le résultat : un suivi de qualité supérieure et une réduction significative de la durée du traitement, grâce à la gestion précise des données thérapeutiques.



# Interface Physique

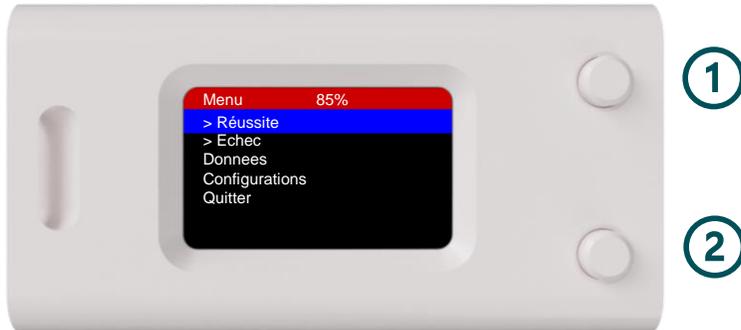

①

## ① Bouton Haut

Appui Court: Menu vers le haut

Appui Long: Sortie du Menu ou Annuler

②

## ② Bouton Bas

Appui Court: Menu vers le bas

Appui Long: Entrée dans Menu ou Confirmer



Le Logostick peut être rechargé avec un câble USB-C standard (comme les téléphones portables).






# Résumés journaliers

- L'utilisateur peut accéder au résumé des données rentrées dans le menu

Menu > Données > Résumé Journalier

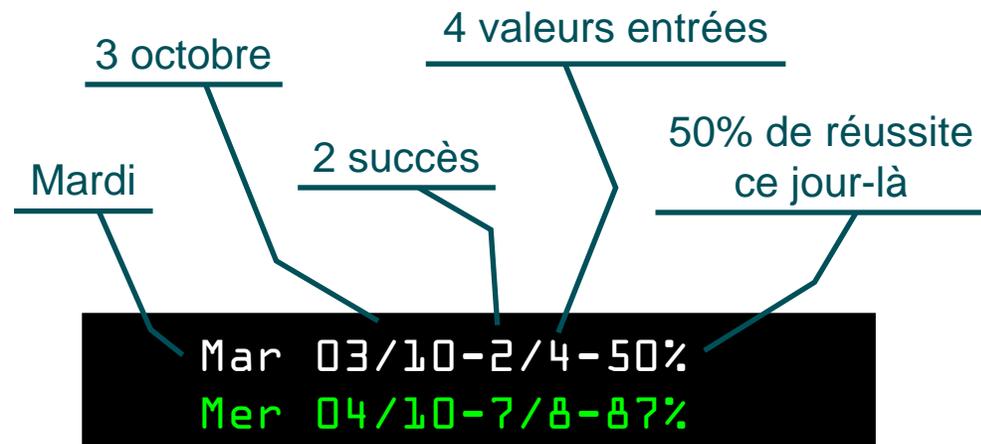

*(i) Au-delà de 80%, la ligne est colorée en vert*

# Utilisation des menus

## En Rouge, le Menu en cours

Ici le menu d'accueil est illustré  
Pour quitter le menu, laissez appuyé le bouton Haut



## La ligne surlignée en Bleu est sélectionnée

Sélectionnez une autre ligne avec les boutons Haut & Bas.  
Pour valider la sélection, laissez appuyé le bouton Bas.



## Echec ou Réussite sont des données enregistrables

Laissez le bouton bas appuyé pour enregistrer la valeur  
L'appareil retourne automatiquement en mode sommeil après



85%

Il s'agit de la valeur résiduelle de la batterie  
La batterie dure environ une semaine



Menu

85%

> Réussite

> Echec



Donnees

Configurations

Quitter

# Connexion Wifi



- Le Logostick peut être relié à Internet par Wifi.
- Pour cela, rentrez dans le menu du Logostick:
  - > Configuration > WiFi
- Un réseau WiFi est temporairement créé par l'appareil afin de rentrer le mot de passe de votre Wifi domestique:
  1. Avec votre téléphone mobile, sélectionnez le réseau wifi appelé "Logostick"
  2. Connectez-vous au réseau

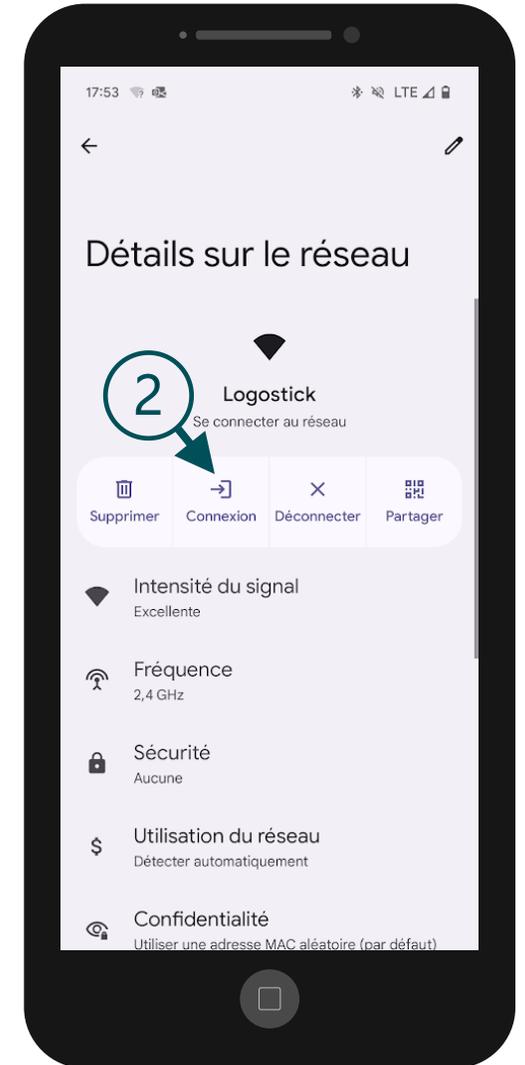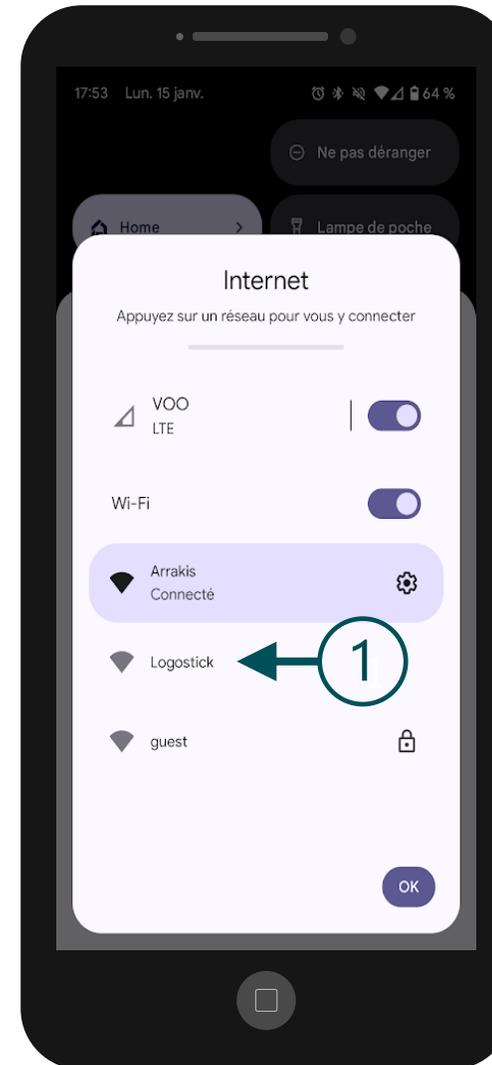

*L'appareil n'a pas besoin du wifi en permanence pour savoir l'heure, il se connecte de temps en temps uniquement (env. 1x par semaine)*

# Connexion Wifi

3. Sélectionnez “configure Wifi”
4. Sélectionnez votre réseau Wifi dans la liste
5. Indiquez votre mot de passe
6. Sauvegardez

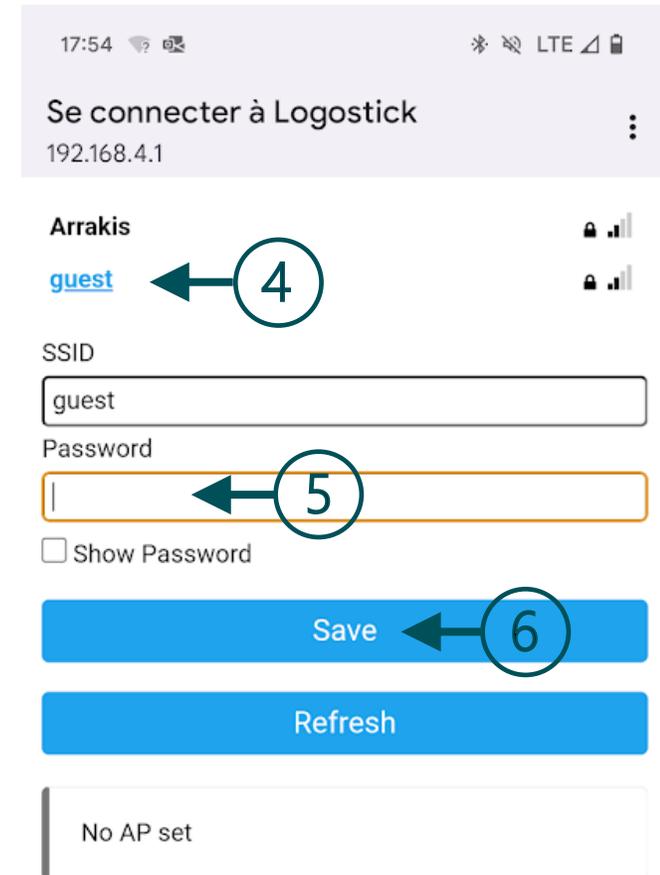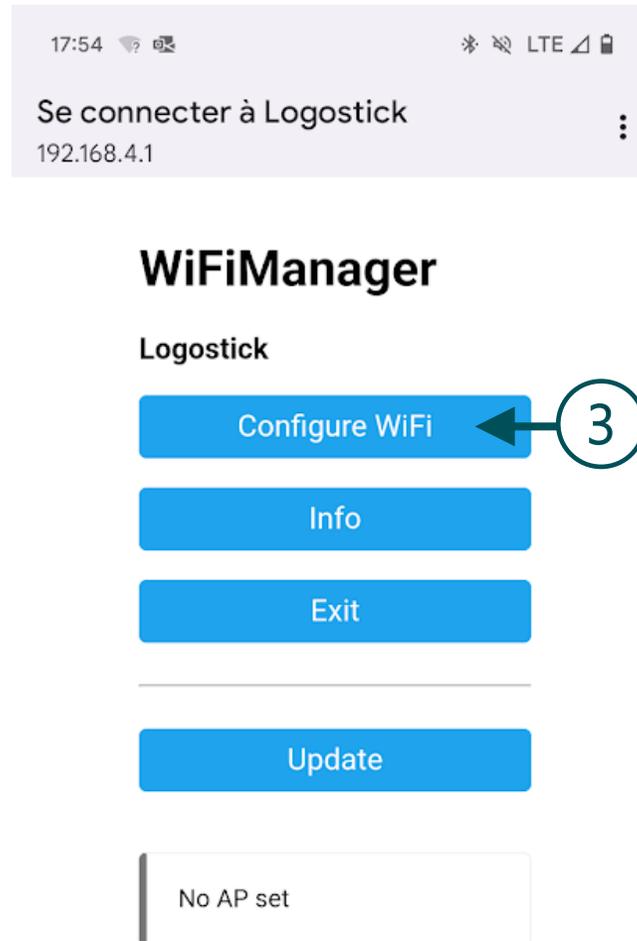

# Définir Date et Heure

- Si une connexion Wifi est définie, la date et l'heure de l'appareil seront mises à jour automatiquement.
- Si aucune connexion Wifi n'est définie, l'utilisateur peut définir la date et l'heure manuellement:

Menu > Configuration > Date et Heure

- Pour définir la date:
  1. Sélectionnez la ligne correspondante Haut / Bas et laissez appuyé le bouton Bas pour valider la ligne.
  2. Utilisez les boutons Haut / Bas pour sélectionner la valeur (date, mois, année) à modifier.
  3. Laissez le bouton Bas appuyé pour confirmer la valeur à modifier (date, mois, année).
  4. Pour changer la valeur, utilisez les boutons Haut / Bas.
  5. Confirmer la valeur en laissant appuyé le bouton Bas.
  6. Répétez les opérations 1 à 5 pour les autres valeurs (date, mois, année) et également pour l'heure (heure et minute)
- L'option [Mise à Jour Wifi] permet de forcer l'appareil à se connecter au réseau pour récupérer la date et l'heure sur Internet.



# Notifications

- Entre 8h et 21h, le Logostick s'allumera pour que vous puissiez interagir avec lui à intervalles réguliers.
- 4 types de notifications sont disponibles
  - Visuelle: l'écran clignote pendant 10 sec
  - Musique: Mélodie de 10 notes environ
  - Bip: 2 bips courts
  - Vibrations: 3 vibrations de 1sec.
- Ces notifications peuvent être sélectionnées ou non dans le menu
  - > Configuration > Notifications
- Pour définir un type de notification:
  1. Sélectionnez la ligne correspondante Haut / Bas et laissez appuyé le bouton Bas pour valider la ligne.
  2. Pour changer entre Oui / Non, utilisez les boutons Haut / Bas.
  3. Confirmez en laissant appuyé le bouton Bas.






# Résumés journaliers

- L'utilisateur peut accéder au résumé des données rentrées dans le menu

Menu > Données > Résumé Journalier

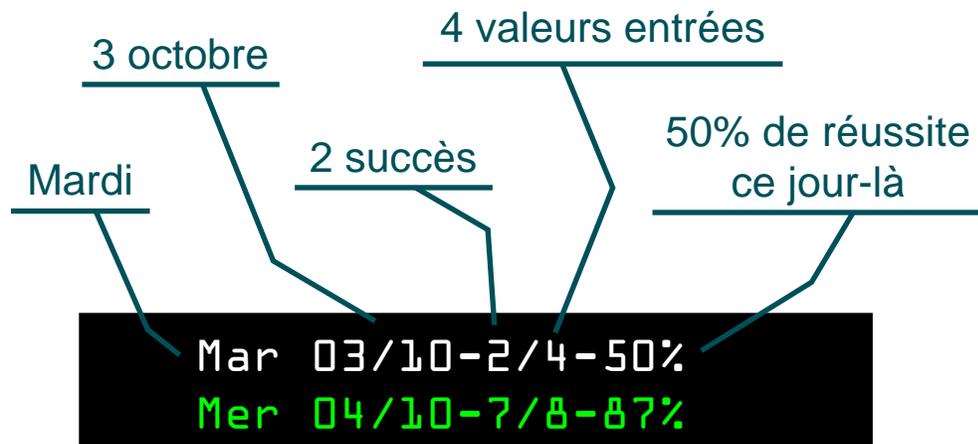

*(i) Au-delà de 80%, la ligne est colorée en vert*

# Données brutes & Suppression

- Les données enregistrées peuvent être consultée dans  
Menu > Données > Données Brutes  
Chaque ligne représente un enregistrement:

Mar	19:15	Succes
Mar	20:15	Echec
Mer	08:12	Succes
Mer	09:15	Succes
Mer	10:12	Echec
Mer	11:15	Succes



*Le Logostick peut indiquer « Invalide » à la place de l'heure s'il a eu des difficultés à enregistrer l'heure.*



Pour effacer les données, sélectionnez:  
Menu > Données > Effacer Données

# Interface Web Praticien

- Le praticien dispose d'une plateforme web pour vérifier les progrès du patient:


[www.logostick.quietconsult.com](http://www.logostick.quietconsult.com)

- Le patient doit pour cela envoyer les données sur la plateforme avec le menu:

Menu > Données > Envois des données



*Une connexion à un réseau Wifi est nécessaire lors de l'envoi des données*

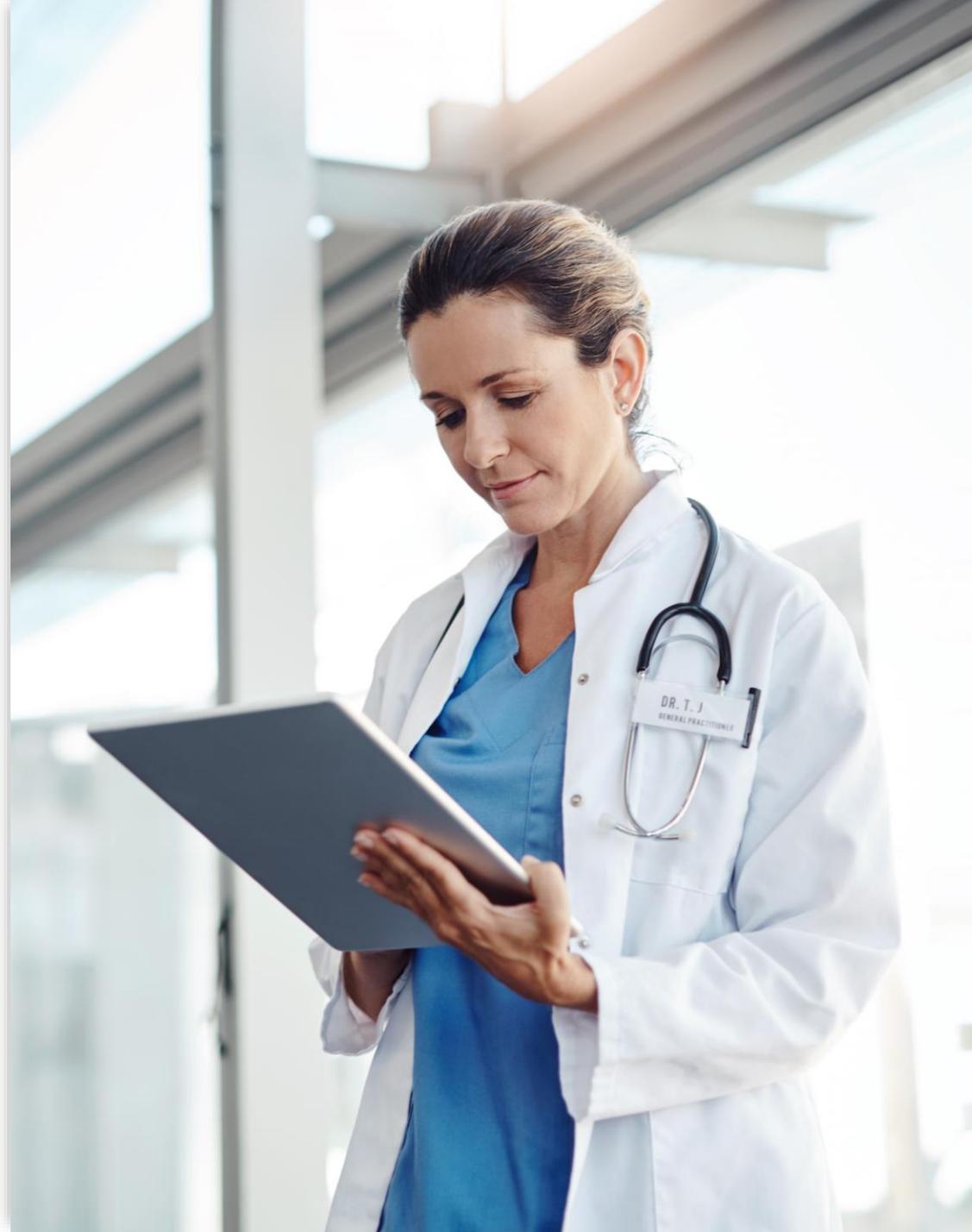



# Premier accès

- Un email de création de compte vous a été envoyé lors de la location de votre premier Logostick.

## Activate your Thingsboard account

To confirm your email address and choose a password, just click the button below.

We may need to send you critical information about our service and it is important that we have an accurate email address.


[Activate Your Account](#)

— The Thingsboard

 *Pensez à vérifier vos SPAM*

# Interface Web Praticien


En bleu, le pourcentage de réussite du patient sur le dernier mois.  
En vert les résultats du mois précédent.

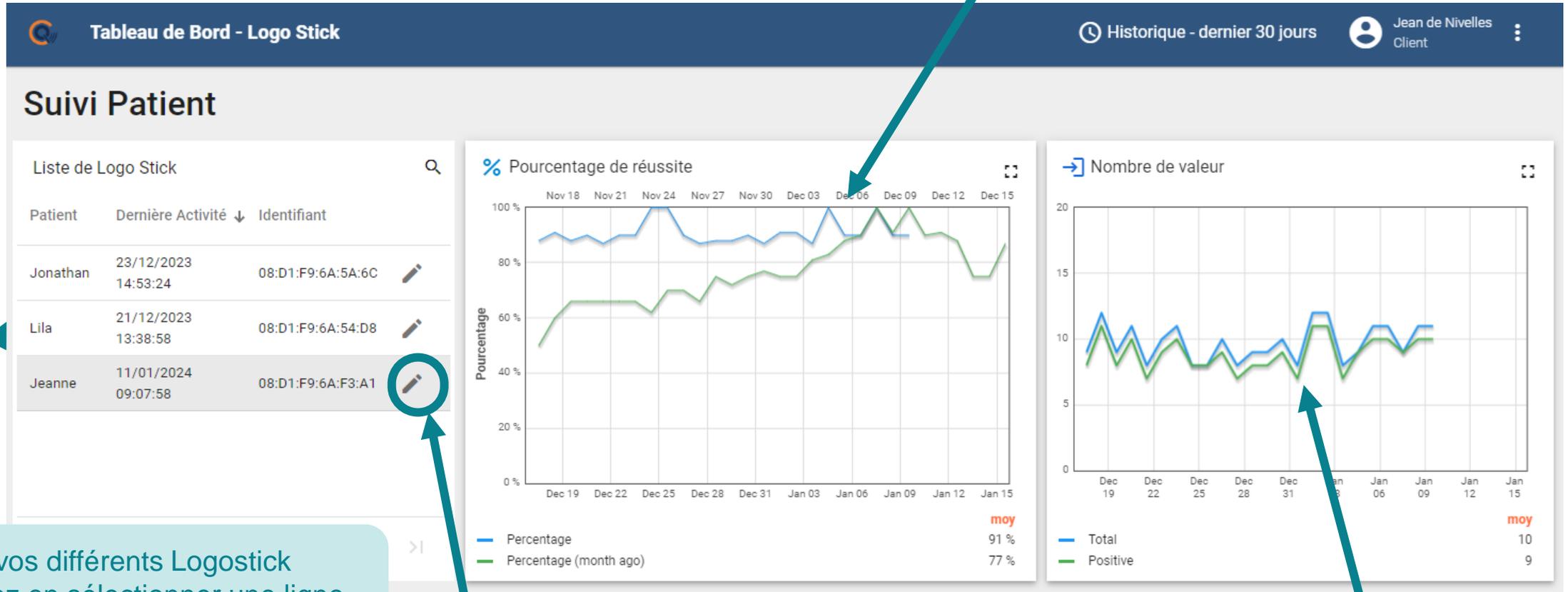

La liste de vos différents Logostick  
Vous pouvez en sélectionner une ligne  
pour afficher les résultats du patient.

Vous pouvez changer le nom du patient

En bleu, le nombre total de données  
rentrées par le patient. En vert, le nombre  
total de réussite indiquées par le patient.

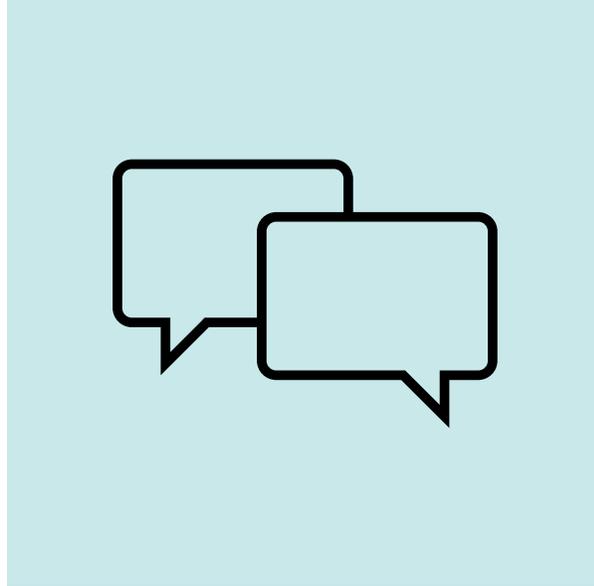

# Contactez-nous



hello@logostick.be



0032 495 42 42 65



Chemin de Grand Peine 3  
1400 Nivelles – Belgium



www.logostick.be